
Schwerhörigen-Verein
Nordwestschweiz
Hören heisst dazugehören.


Geschäftsstelle und Kurslokal:
Falknerstrasse 33, 4001 Basel
Tel.: 061 261 22 24 I 079 889 95 63
P.C.: 15-192251-3
www.svnws.ch - info@svnws.ch

Kurzanleitung mobile Höranlage (mHA)

Sender (TELME-T)

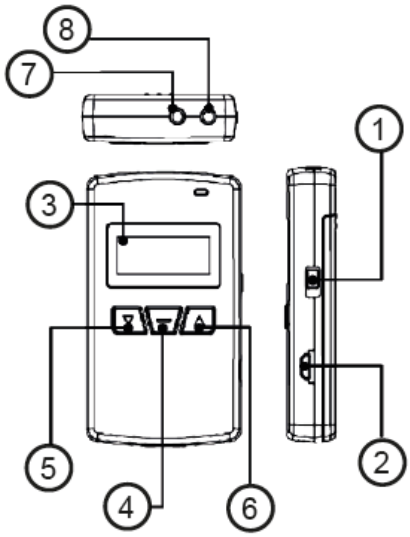

Empfänger (TELME-R)

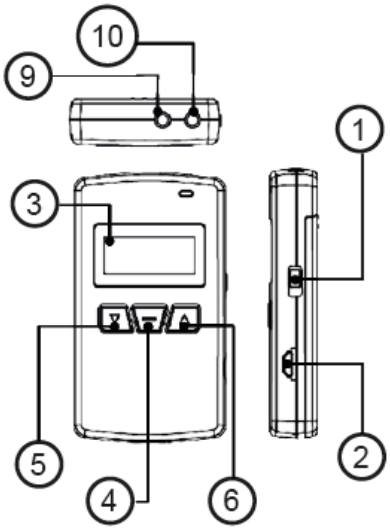

1	An-/Ausschalter
2	USB Ladeanschluss
3	LCD
4	Mode Taste
5	Auf Taste
6	Ab Taste
7	Mikrofonanschluss
8	Aux In
9	Kopfhöreranschluss 1
10	Kopfhöreranschluss 2

Ein-/Ausschalten

Um die Geräte einzuschalten, schieben Sie den *„An-/Ausschalter“* nach oben. Das LCD-Display schaltet sich ein und zeigt die gewählte Gruppennummer. Um die Geräte auszuschalten, schieben Sie den *„An-/Ausschalter“* wieder nach unten.

Schwerhörigen-Verein
Nordwestschweiz
Hören heisst dazugehören.

Geschäftsstelle und Kurslokal:
Falknerstrasse 33, 4001 Basel
Tel.: 061 261 22 24 I 079 889 95 63
P.C.: 15-192251-3
www.svnws.ch - info@svnws.ch

Senden (nur TELME-T - braun)
Das Gerät beginnt automatisch zu senden, sobald es eingeschaltet wird. Auf dem LCD ist *„TALK"* zu sehen.

Empfang (nur TELME-R - weiss)
Der Empfangsmodus wird automatisch gestartet, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Die Balkenanzeige zeigt die Stärke des Empfangssignals an.

Lautstärke Erhöhen/Senken (nur TELME-R)
Drücken Sie die „*Mode*"-Taste einmal. Es werden „*VOL*" und die aktuell gewählte Lautstärkestufe angezeigt. Die Lautstärke wird durch Drücken der Tasten „▲" oder „▼" angepasst. Es kann zwischen den Stufen 0-8 gewählt werden.

Gruppenauswahl
Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie es wieder ein, während Sie die „▲" und „▼" gedrückt halten. Nun blinkt „*GRP*" auf dem LCD. Wählen Sie die gewünschte Gruppe, indem sie „▲" oder „▼" drücken. Die Auswahl wird nach 5 Sekunden ohne Tastendruck bestätigt. „*GRP*" hört auf zu blinken und die gewählte Gruppennummer wird angezeigt.
Wir stellen Ihnen bei der Übergabe die korrekte Gruppe ein. Diese Funktion ist informativ gelistet. Für die Anwendung der mHA brauchen Sie sie nicht.

Mithörfunktion Ein/Aus (nur TELME-T)
Mit der Mithörfunktion kann der Benutzer seine eigene Stimme oder eingespielte Audio-Dateien bei der Übertragung mithören. Um die Mithörfunktion zu aktivieren, schalten Sie den „Power" Schalter auf „Off". Halten Sie nun die "▲" und "▼" Tasten gedrückt und bewegen den „Power" Schalter auf „On". Deutsch 5 Im Display blinkt „GRP". Drücken Sie nun die „Mode" Taste und wählen Sie mit "▲" oder "▼", ob Sie die Mithörfunktion einschalten („SO") oder ausschalten („SF") wollen. Nach 3sek. wird Ihre Auswahl beibehalten.
Diese Funktion ist informativ gelistet. Für die Anwendung der mHA brauchen Sie sie nicht.

Batterie
Die wiederaufladbare Li-Ionen Batterie mit 3,7V, 1100mAh muss mit den Kontakten nach unten links zeigend in das Gerät eingesetzt werden. Um die Batterie aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Gerätes an. Die rote LED zeigt an, dass das Gerät geladen wird. Sobald das Gerät vollgeladen ist, schaltet sich die LED ab.
Diese Funktion ist informativ gelistet. Für die Anwendung der mHA brauchen Sie sie nicht.